

## Neopreenhandschoenen zonder chemische accelerators voor een ongeëvenaarde combinatie van gevoeligheid en duurzaamheid voor de steriele omgeving

- De nieuwe samenstelling zorgt voor ongeëvenaarde vingergevoeligheid als bij droge toepassingen dubbele handschoenen worden gedragen, dankzij de polymeerdikte van 0,13 mm (5 mil).
- De productie met ergonomisch gevormde, handspecifieke mallen zorgt voor een superieure pasvorm en veel comfort, met minder belasting en vermoeidheid van de handen.
- De handschoen is gemaakt van 100% polychloropreen en ze biedt spatbescherming tegen een hele reeks chemicaliën.
- Omdat er bij de productie geen natuurrubberlatex of versnellers worden gebruikt, is het risico op huidallergieën van Type I en IV beperkt.
- De Ansell SureFit Technology voorkomt dat de manchet naar beneden rolt en beschermt dus nog beter.
- Gemakkelijker aan te trekken met droge of natte handen dankzij de binnencoating in polyurethaan.
- Door het ontwerp en de geringe dikte van het polymeer kunnen handschoenen gemakkelijk en comfortabel over elkaar worden gedragen. Door de crèmekleur vallen defecten onmiddellijk op in combinatie met handschoenen in een andere kleur.
- Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: TouchNTuff® 73-300 niet-steriel en TouchNTuff® 73-500 steriel.
- Voldoet aan klasse 100 (ISO 5)/graad A voor de cleanroomomgeving
- Dun ontwerp voor superieure vingergevoeligheid
- Bestand tegen spatten van uiteenlopende chemicaliën
- Ideaal voor het dragen van twee handschoenen tegelijk



# TouchNTuff®

ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

## 73-500

Vingergevoelige neopreenhandschoenen. Een nieuw gevoel bij het dragen van twee handschoenen over elkaar voor droge toepassingen.

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

### PRODUCTINFORMATIE

	<b>73-500</b>
Materiaal	Neopreen (polychloropreen)
Kleur	Crème
Vorm	Anatomisch met gebogen vingers
Manchet	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001:2015
Naleven van regelgeving	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 9001
Verpakking	1 paar per binnenste poly verpakking; 10 binnenste poly verpakkingen per binnenste polyester zak; 5 buitenste polyester zakken per zak; 4 zakjes per meester zak; 1 master zakje 200 paren per doos / case
Opslag	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Sri Lanka
Beschikbare maten	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Glad
Sterilisatiemethode	Gammastraling (25 kGy)
Cleanroom Klas	Klasse 100/ISO 5/Graad A
Houdbaarheidstermijn	3 Years
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Eiwitgehalte	n.v.t.: bevat geen natuurlijk rubberlatex
Antistatisch	Niet-getest
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen</li> </ul>

### FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	300 / 12		EN 420/ASTM D3767
Vrij van gaatjes	0.65 AQL		EN 455-1/ASTM D3577
Gemiddeld aantal deeltjes $\geq 0,5\mu\text{m}$ (telling/cm <sup>2</sup> )	$\leq 2500$		IEST-RP-CC005.4
Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)	0.10 - 0.15 / 5.90 - 5.91		EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)	0.11 - 0.17 / 4.33 - 6.69		EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)	0.11 - 0.17 / 4.33 - 6.69		EN 420/ASTM D3767
	Voor veroudering	Tijdens veroudering	
Maximale treksterkte (MPa)	17	12	ASTM D412-06a
Treksterkte bij breuk (N)	9	9	EN 455-2

### BESTELINFORMATIE

	MAAT	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
73-500	NABESTELNR.	73500055	73500060	73500065	73500070	73500075	73500080	73500085	73500090

Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

#### Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australië

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### UK


Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

### Technologie

## SUREFIT™

### Cuff Roll-down Technology

### Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

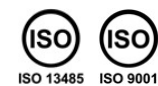

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.