

Superieure bescherming voor de schone en steriele omgeving die allergische reacties voorkomt

TouchNTuff® biedt niet alleen evenveel comfort en soepelheid als handschoenen in natuurrubber, voor een even voordelige prijs, maar garandeert door haar neopreensamenstelling ook een hogere chemische weerstand. TouchNTuff®: voor een optimale bescherming van product en werknemer.



- Steriele handschoen geschikt voor de aseptische omgeving en cleanrooms klasse 100 (ISO 5)/graad A
- Neopreenformule zonder latexproteïnen en accelerators die huidirritatie en type I- en type IV-allergische reacties kunnen veroorzaken
- Ansell SUREFIT™ Technology helpt voorkomen dat de manchet naar beneden rolt
- Uitstekende weerstand tegen perforaties en duurzaamheid
- Superieure bescherming tegen chemische spatten

Sectoren

- Farmaceutische productie
- Laboratorium Onderzoek en Ontwikkeling
- Productie binnen de biotechnologie
- Gecontroleerde en kritieke omgevingen
- Productie en productie

Aanbevolen voor

- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Monsters nemen en verwerken
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Aseptisch afvullen en etiketteren



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTINFORMATIE

	73-701
Materiaal	Neopreen (polychloropreen)
Kleur	Groen
Vorm	Anatomisch met gebogen vingers
Manchet	Recht, met SUREFIT™ Technology
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001:2015
Naleven van regelgeving	21 CFR § 820 Kwaliteitssysteemvoorschriften, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpakking	1 paar per binnenste poly verpakking; 10 binnenste poly verpakkingen per binnenste polyester zak; 5 buitenste polyester zakken per zak; 4 zakjes per meester zak; 1 master zakje 200 paren per doos / case
Opslag	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Beschikbare maten	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Sterilisatiemethode	Gammastraling (25 kGy)
Cleanroom Klas	Klasse 100/ISO 5/Graad A
Houdbaarheidstermijn	5 years
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Eiwitgehalte	n.v.t.: bevat geen natuurlijk rubberlatex
Antistatisch	Nee
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> Geen

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	295 / 11.6		EN 420/ASTM D3767
Vrij van gaatjes	0.65 AQL		EN 455-1/ASTM D3577
Gemiddeld aantal deeltjes $\geq 0,5\mu\text{m}$ (telling/cm ²)	≤ 3500		TEST-RP-CC005.4
Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)	0.18 / 7		EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)	0.19 / 8.3		EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)	0.15		EN 420/ASTM D3767
	Voor veroudering	Tijdens veroudering	
Maximale treksterkte (MPa)	17	12	ASTM D412-06a
Treksterkte bij breuk (N)	9	9	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

	MAAT	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
73-701	NABESTELNR.	73701060	73701065	73701070	73701075	73701080	73701085	73701090

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australië

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK


Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Technologie

SUREFIT™

Cuff Roll-down Technology

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

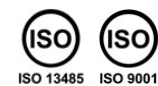

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.